

## ニュース・リリース

お得意先各位

2017年5月1日  
株式会社瑞光メディカル

株式会社スズケンのプライベートブランド商品  
「KenzープラスモイストEX」を5月1日より新発売  
～高吸収タイプのプラスモイストが創傷治療の様々なニーズに応えます～

株式会社瑞光の子会社である株式会社瑞光メディカル(本社:大阪府摂津市鳥飼上 4-3-50、代表取締役社長:和田 昇)は、新鮮外傷や熱傷、また、褥瘡や皮膚潰瘍などの被覆・保護材としてご好評いただいておりますプラスモイスト®シリーズの商品ラインナップに、従来のプラスモイストVよりも吸収力に優れたプレミアムタイプの商品を新たに加え、2017年5月1日より株式会社スズケンのプライベートブランド(商品名:「KenzープラスモイストEX」)として、販売を開始いたします。

### ◆「KenzープラスモイストEX」の開発背景と商品概要

瑞光メディカルでは、2007年よりプラスモイスト®シリーズ他の上市を行い、新鮮外傷や熱傷、また、褥瘡や皮膚潰瘍などの保護材として数多くの実績を上げてまいりました。

当該プラスモイスト®シリーズは、その独自の特長である創傷面の浸出液量を適正にコントロールし吸収する『浸出液コントロール機能』により、医療現場で高いご好評を頂いておりますが、一方で、更に高い吸収力を有した新タイプを望む声も多数頂いておりました。

この度、瑞光メディカルでは、プラスモイストの吸収能力を大幅に向上させ、かつ吸収速度を上げることにより、浸出液量の多い症例にも更に使い易いプレミアムタイプ「KenzープラスモイストEX」を開発いたしました。

### ◆商品明細

【一般医療機器】

商品名(商品コード)	サイズ(mm)	入数(1袋)	仕様	定価[税抜]	JANコード
KenzープラスモイストEX (382-030107)	200×250	5枚	ジップ袋入 [未滅菌]	5,000円	4987382030107


販売名: プラスモイストSA

一般的名称: 医療用不織布(JMDNコード:34655000), 医療機器製造販売届出番号: 27B2X00217PMSA00

## ◆商品イメージ



パッケージデザイン

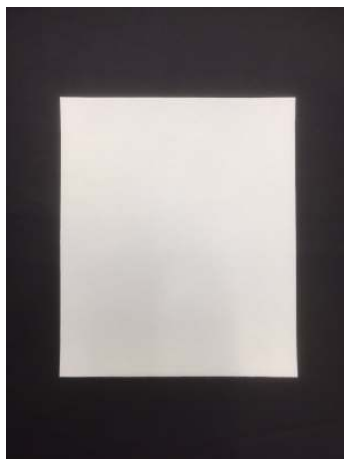


本体

## ◆「Kenz-プラスモイストEX」の特長

- プラスモイストVの約2倍の吸収量があります(下図参照)。
- 創傷面から出る浸出液を速やかに吸収します。
- 本品と創傷面との固着を防ぎ、治癒まで優しく保護します。
- 創傷面の乾燥や痂皮(かさぶた)形成による固着を防ぐので、交換時の痛みも少なく快適です。
- 創傷面から出る浸出液を吸収し、創傷面以外の皮膚が「ムれる」、「ふやける」、「カブレる」等の皮膚トラブルが生じにくい構造です。
- 非常に柔軟で素材でクッション性を有しており、創傷面を優しく保護します。
- 創傷面の形状や大きさに合わせて、必要な分だけ自由にカットして使用できるので非常に経済的です。


【吸収量の比較(10cm×10cm 当たり)】

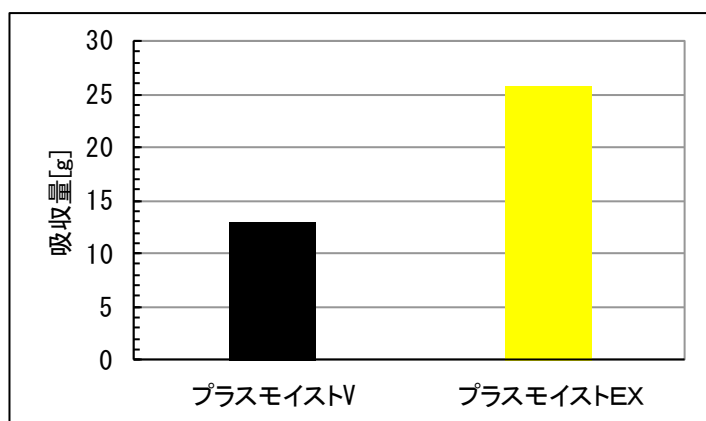

※)測定方法

EN13726-1:2002( Test methods for primary wound dressings - Part1:Aspects of absorbency)

【浸出液コントロール機能 拡大イメージ図】

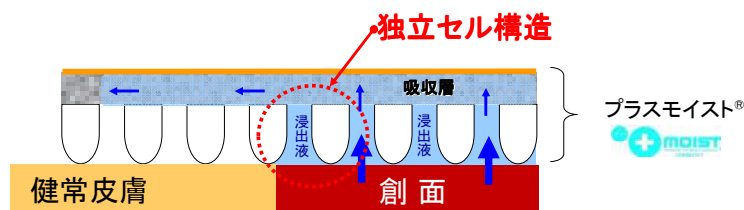

◆使用方法

1. 創部を生理食塩液や水道水等で十分に洗浄し、汚れや異物を取り除いてください。また、消毒液を用いた場合は消毒液が残らないように生理食塩液や水道水等で十分に洗い流してください。(本品交換時にも必ずこの処置を行ってください。)
2. 本品を包装袋から取り出し、周囲の健常皮膚も十分に被覆できるサイズ、形状にハサミ等で適宜カットしてください。
3. 本品の患部接触面(透過層【白色】側)を創部にあてがい、本品の端がしわにならないように本品を創部に密着させてください。
4. 本品が創部からずれないようにサージカルテープ、フィルムドレッシング等を用い、本品を健常皮膚部で固定してください。通常、本品の固定は、ずれが生じない最低限の範囲で実施すれば良く、本品の周囲が一部開放状態となるように固定します。なお、浸出液の量や本品貼付後の使用状況等によっては、本品の周囲を完全に密閉するように固定しても良いです。
5. 通常、浸出液が本品周囲から漏れ出すまで、連続で使用できますが、早めの交換を推奨します。(少なくとも1日1回の交換を推奨します。)  
また万が一周囲から漏れ出した浸出液で衣服が汚れる事が気になる場合は、本品の上からガーゼ等を覆ってください。

◆発売元 : 株式会社スズケン

◆製造販売元 : 株式会社瑞光メディカル

【ニュース・リリースに関するお問合せ】

株式会社瑞光メディカル 販売管理部

メールアドレス: plus\_moist@zuiko.co.jp

TEL: 072-653-8877 FAX: 072-653-8876

【販売に関するお問合せ】

株式会社スズケン ケンツ事業部

TEL: 052-950-6325 FAX: 052-962-7440