

ニュース・リリース

お得意先各位

2026 年 6 月 21 日
株式会社瑞光メディカル

「ズイコウパッド MD アドバンス」を6月21日より新発売
～柔軟性に優れた高吸収パッドが様々なニーズに応えます～

株式会社瑞光の子会社である株式会社瑞光メディカル(本社: 大阪府摂津市、代表取締役社長: 和田晃司)は、雑貨品として浸出液の吸収をサポートする高吸収パッド「ズイコウパッド」を、2011 年より販売して参りましたが、かねてより多くのユーザー様より頂戴しておりました『傷口にも安心して使用することができる商品への改善要望』を受け、この度、「ズイコウパッド MD アドバンス」を一般医療機器として新たにラインナップに加え、2026 年 6 月 21 日から販売を開始いたします。

◆商品明細、

商品名 (品番)		サイズ[mm]		入数 [枚/箱]	定価 [円]	JAN コード
		全体	吸収体部			
ズイコウパッド MD アドバンス	レギュラー (ZADRA)	200×190	150×150	10	1,250	4571256951263
	ハーフ (ZADHA)	200×95	150×75	10	1,000	4571256951256
	ミニ (ZADMF)	95×65	70×50	50	3,250	4571256951249


一般医療機器 販売名: ズイコウパッド

一般的名称: 医療用不織布(JMDN コード: 34655000), 医療機器製造販売届出番号: 27B2X00217ZPMD00

製造販売元: 株式会社瑞光メディカル

成分: ポリエチレン、セルロース等 その他: 未滅菌、日本製

◆商品イメージ

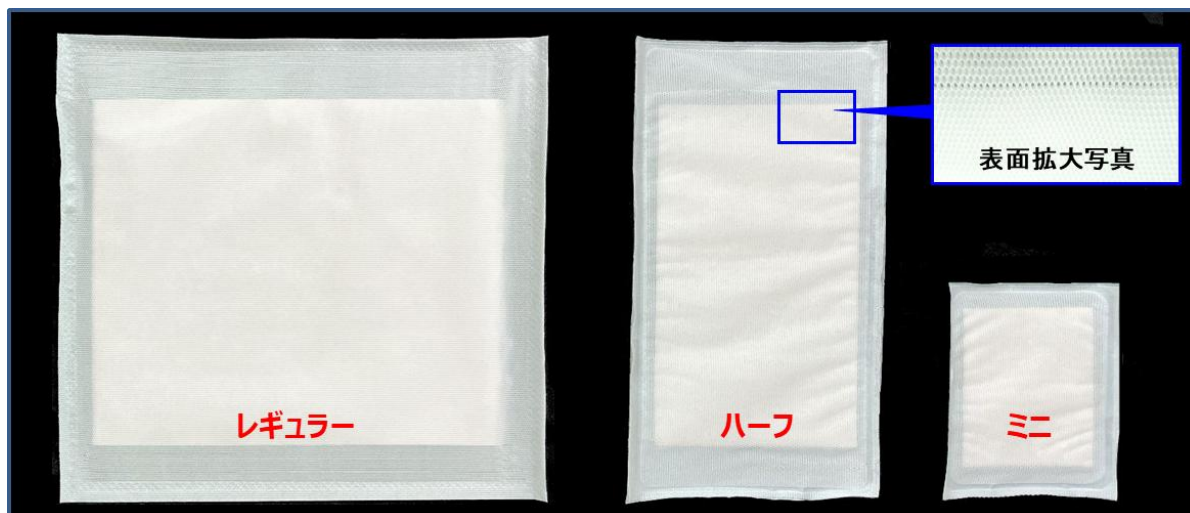

◆「ズイコウパッド MD アドバンス」の特長

- 柔軟なパッドが創面を優しく包みます。
- 適度な速度で浸出液を吸収し、創面に固着し難いです。
- 吸収力に優れ、浸出液の多い症例に対応可能です(吸収力:40g/100cm²)^(※)。
- 表面材と吸収体が固定されておらず、ズレ応力の緩和が期待できます。
- 1枚ずつ個別包装されているので、清潔にご使用頂くことが可能です。

※測定方法:EN13726: 2002

◆使用方法

- ①患部を水道水等でよく洗い水気を拭き取った後、本品の表面(メッシュ面)を創面に当ててください。
- ②本品がずれないように、サージカルテープ、包帯、ネット、サポーター等で固定ください。

通常、浸出液が本品周囲から漏れ出すまで、連続で使用できますが、できる限り早めの交換を推奨します。

◆発売開始日時

2026 年 6 月 21 日から順次出荷致します。

◆製造販売元

株式会社瑞光メディカル

【ニュース・リリースに関するお問合せ】

株式会社瑞光メディカル 営業部

メールアドレス: plus_moist@zuiko.co.jp

TEL: 072-653-8877 FAX: 072-653-8876